


WinCT for Wireless の Windows10 へのインストールに付いての注意

Windows10 はデフォルトで .NET Framework 4.6 が入っていますので、WinCT for Wireless のインストールに必要な .NET Framework 2.0 をアクティブに設定する必要があります。

以下にその手順を示します。

- 1, PC がネットに繋がっていることを確認してください。
- 2, 「コントロールパネル」から「プログラム」をクリックします。
- 3, 「プログラムと機能」から「Windows の機能の有効化または無効化」をクリックします。

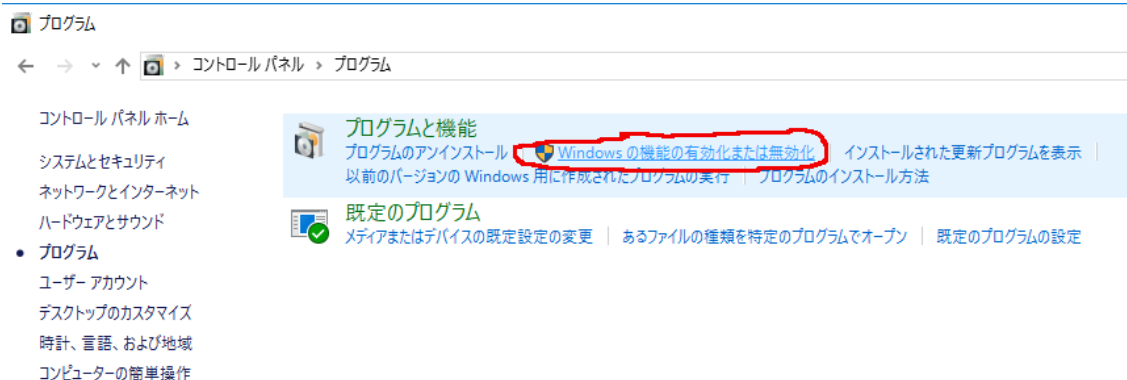

- 4, 「Windows の機能の有効化または無効化」のウィンドウが出ますので、上部に位置する「.NET Framework 3.5(.NET2.0 及び 3.0 を含む)」のチェックボックスを有効にしてください。
- 「OK」をクリックしますと、ダウンロードされますので、後は画面の指示に従って下さい。

